
Prothetische Versorgung eines Z5-TL Implantats

Intraorale Zementierung*

*** Keine extraorale Zementierung möglich**

1

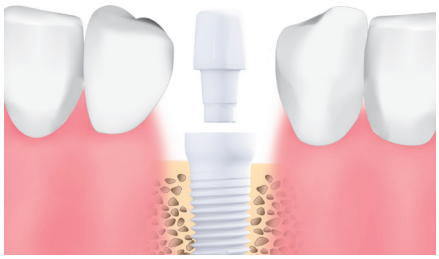

Setzen Sie das Abutment mit der Hand in das Implantat. Das Innensechskant garantiert eine feste Verankerung des Abutments.

Z5-TL Konusspalt



Jede Schraube wird mit beiden Schraubendrehern geliefert

Titan Keramik





BL-OST-H BL-OSC-H




SD-BS-S SD-BS-L

2

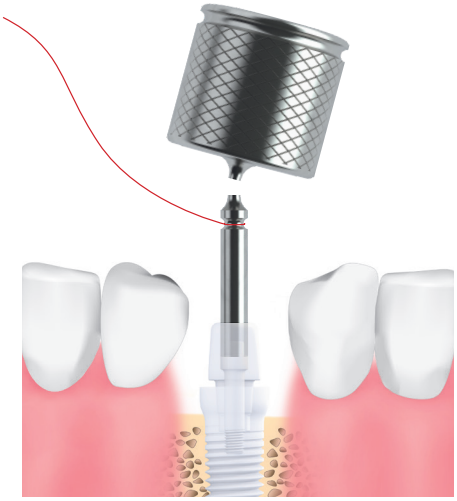

Verschrauben Sie Abutment und Implantat mit der Okklusalschraube bis der Schraubendreher bricht.

HINWEIS


Zum Herauslösen des Abutments entfernen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher SD-BS-S/L und lockern das Abutment mit dem Löseinstrument BL-CD.

BL-CD




Verwenden Sie Zahnseide zum Sichern des Schraubendrehers

3

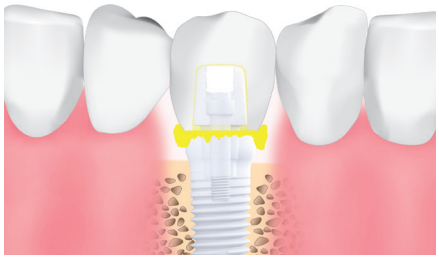

Verschliessen Sie den Schraubenkanal mit Teflonband und zementieren Sie die Krone auf das Abutment.

4

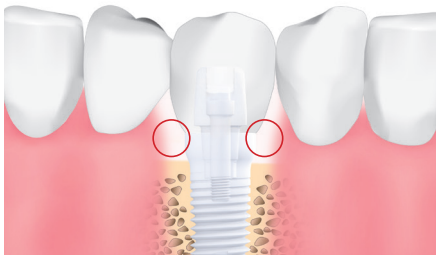

Zementreste sind zwingend vollständig zu entfernen.

Z-SYSTEMS
swiss ceramic implants

Bitte lesen Sie das Z5-TL Handbuch sorgfältig durch.

Fragen?
Rufen Sie uns gerne an
04242-22272
www.zauchnerdentalprodukte.at

zauchner
dental-produkte gmbh